

*Detiene el dolor eficazmente
alivia y reconforta*

24
HRS

PAINMASTER®

Terapia de microcorriente

Específicamente recomendada para:

- ▶▶▶ Dolores musculares y espasmos
- ▶▶▶ Fibromialgia
- ▶▶▶ Dolor de cuello y espalda
- ▶▶▶ Artritis
- ▶▶▶ Epicondilitis
- ▶▶▶ Ciática
- ▶▶▶ Dolor en hombro
- ▶▶▶ Dolor en rodillas y articulaciones
- ▶▶▶ Lesiones deportivas
- ▶▶▶ Dolor y malestar muscular crónico

ALIVIO INMEDIATO




- Avance científico único, con alivio del dolor médicamente comprobado.
- Una vez colocado en cualquiera de ambos lados de la zona del dolor, la ligera microcorriente estimula el tejido lesionado activando el proceso natural de sanación del cuerpo.
- Completamente seguro y fácil de usar 24 horas al día.
- Pila incorporada, dura hasta 250 horas.
- El parche se puede quitar y volver a aplicar varias veces.
- Ligero y discreto...se puede llevar debajo de la ropa más ligera.
- Para resultados óptimos, la terapia se debe aplicar continuamente de 3 a 5 días.

¿Cómo alivia el dolor directamente la tecnología de microcorriente?



Las células lesionadas ponen resistencia a las corrientes naturales del cuerpo, impidiendo así el suministro de la sangre, del oxígeno y de nutrientes vitales (A). La microcorriente del parche Painmaster penetra en las células inflamadas, restaurando el suministro esencial de la sangre, eliminando los residuos celulares y produciendo alivio directo del dolor. (B)

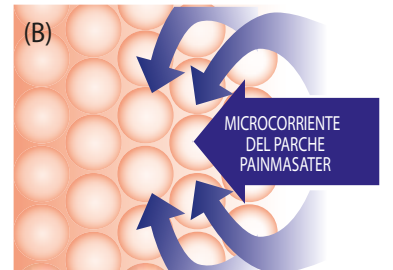

PAINMASTER®

Tecnología comprobada para el control del dolor

PARCHE DE TERAPIA CON MICROCORRIENTE PAINMASTER

El parche de micro corriente PAINMASTER es un nuevo sistema de estimulación compuesto por dos electrodos con gel unidos por un cable. Uno de los electrodos lleva incorporada la batería y una luz roja que indica que el sistema está funcionando.

Este innovador parche de terapia por micro corriente se puede utilizar de forma ambulatoria (casa, trabajo, deporte, etc..) para aliviar el dolor durante varios días de forma continua, discreta, sin necesidad de cables ni aparatos y con una duración de 250 horas.



TOTALMENTE SEGURO Y SIN EFECTOS SECUNDARIOS

El uso de estimulación eléctrica para el alivio del dolor a un nivel bajo de corriente no es un tratamiento nuevo. Se está utilizando desde hace años para: dolor en espalda, espasmos musculares, hombros doloridos, artritis, ciática, dolor en rodillas y articulaciones, fibromialgias y otros dolores y malestares musculares crónicos. Estos tratamientos se realizaban en hospitales y clínicas con grandes aparatos y en periodos de tiempos cortos. El parche de micro corriente aporta la posibilidad de tratamiento continuo sin límite de tiempo. El parche se puede quitar y volver a poner varias veces. El PAINMASTER ha sido testado Médica y Tecnológicamente para el alivio del dolor. Los electrodos, colocados en cada lado de la zona dolorida, producen una suave micro corriente eléctrica de baja intensidad. Esto hace que no se note ninguna sensación en la estimulación. La micro corriente estimula el tejido atrayendo sangre y oxígeno a la zona afectada, activando así el proceso regenerador natural del cuerpo, reduciendo el dolor y la inflamación sin ningún efecto secundario dañino.



INFORMACION TECNICA

- Micro Current Therapy patch model 7500 v6.
- Voltaje: 2,7 v DC hasta 25 μ A.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Tratamiento continuo.
- Circuito y batería incluidos en el parche.

CONTIENE: 1 controlador de microcorriente + 1 juego de parches